


# Mi Electric Toothbrush Používateľský manuál




## 1. Prehľad produktu

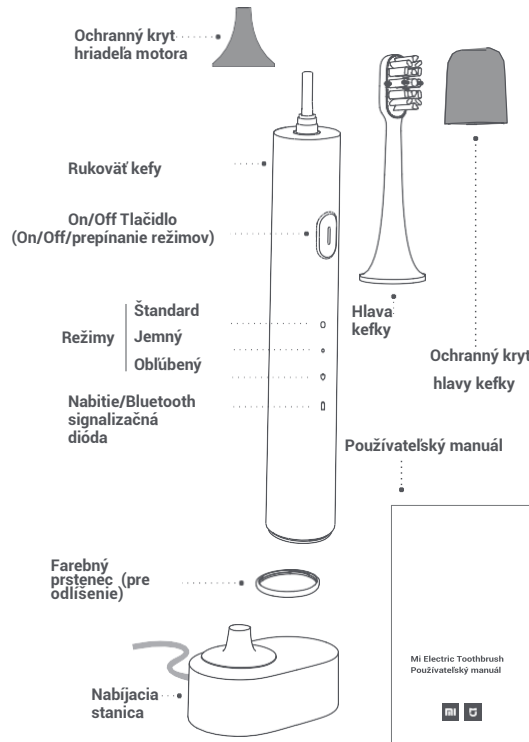

## b. Inštalácia a výmena farebného prstenca

- Vymeňte farebný prstenec na akúkoľvek farbu
- Odstránenie farebného prstenca: Drzte zubnú kefku ľavou rukou, stlačte ľavou rukou (textúrovanú) zadnú časť zubnej kefy, stlačte pravým ukazovákikom proti vzduchovému otvoru v dolnej časti, vložte necht do medzery medzi farebným krúžkom a rukoväťou, zatlačte farebný krúžok smerom hore a trochu ho vysuňte.
- Inštalácia farebného krúžku: Udržujte farebný krúžok kĺbmi smerom dole a spojte ho s tromi kĺbmi na rukoväti. Stlačením farebného krúžku dole ho nainštalujte.

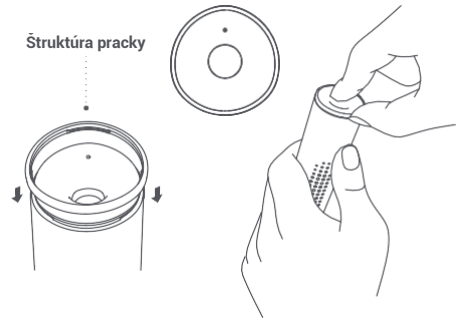

## c. Vytlačte zubnú pastu

Navlhčite hlavu kefy a vytlačte primerané množstvo zubnej pasty na hlavu kefy.



## Bezpečnostné opatrenie

### ⚠ Poznámka

Môžete pociťovať svrbenie alebo ľahké krvácanie pri prvom použití. To je spôsobené tým, že dasná nie sú zvyknuté na takto efektívne čistenie. Je odporúčané používať oblúbený režim kefy. Tento symptóm väčšinou zmizne po 1 – 2 týždňoch. Ak trvá dlhšie ako 2 týždne, tak prestaňte používať kefku a navštívte svojho zubára.

### \* Varovanie

1. Používatelia, ktorí podstúpia ortodontciu, zubnú opravu alebo zubný implantát, by mali produkt používať pod vedením zubných lekárov.
2. Mi Electric Toothbrush spĺňa bezpečnostné normy pre elektromagnetické zariadenie. Ak máte akékoľvek pochybnosti o kardiostimulátoroch alebo iných implantovaných zariadeniach, poraďte sa s lekárom alebo výrobcom implantovaných prístrojov pred použitím.
3. Tento výrobok je určený iba na čistenie zubov, dasien a jazyka. Nepoužívajte ho na žiadne iné účely. Ak máte pocit nepohodlia alebo bolesti, okamžite prestaňte používať tento výrobok a konzultujte používanie výrobku s lekárom.

### \* Zákazy

1. Nabíjaciú stanicu neponárajte do vody ani do inej kvapaliny.
2. Po čistení skontrolujte, či je napájacia zástrčka nabíjacej základne úplne suchá, potom zapojte do napájacieho zdroja.
3. Tento výrobok obsahuje zabudované nabíjacie batérie. Nevhadzujte výrobok do ohňa, nenabíjajte, nepoužívajte ho ani ho neumiestňujte do prostredia s vysokou teplotou.
4. Nepokúšajte sa produkt modifikovať, rozoberať alebo opravovať.

### \* Dôležité

1. Pred použitím skontrolujte, či výrobok nie je poškodený. Ak je poškodený, nepoužívajte ho.
2. Pred zapojením do napájacieho zdroja skontrolujte, či je miestny napájací zdroj v súlade s požadovaným napätím vyznačeným na výrobku.
3. Ak dôjde k poškodeniu nabíjacej základne, nepoužívajte ju.
4. Ak výrobok (vrátane rukoväte a hlavy zubnej kefy) vykazuje nejaké známky poškodenia, prestaňte ho používať.
5. Nepoužívajte nabíjaciú základňu v prostredí s vysokou teplotou (napr. pri vystavení slnku).
6. Nepoužívajte zubnú kefku v priebehu kúpania alebo sprchovania.

### \* Rady

1. Nezdierajte hlavičku zubnej kefy s ostatnými.
2. Neobtačajte napájací kábel okolo nabíjacej základne, ak je pripojená k napájaciemu zdroju.
3. Neumiestňujte kovové predmety do nabíjacej základne, ak je pripojená k napájaciemu zdroju.


## 2. Ako používať kefku

### Tip:

Môžete pociťovať svrbenie alebo ľahké krvácanie pri prvom použití. To je spôsobené tým, že dasná nie sú zvyknuté na takto efektívne čistenie. Je odporúčané používať oblúbený režim kefy. Tento symptóm väčšinou zmizne po 1 – 2 týždňoch. Ak trvá dlhšie ako 2 týždne, tak prestaňte používať kefku a navštívte svojho zubára.

### a. Inštalácia hlavy kefy

Upevnite hlavu zubnej kefy na rukoväť zubnej kefy a nechajte priestor pre určitú medzeru medzi oboma časťami. (Medzera zaistí, aby hlava zubnej kefy neprišla do styku s telom zubnej kefy v priebehu vysokofrekvenčných vibrácií)

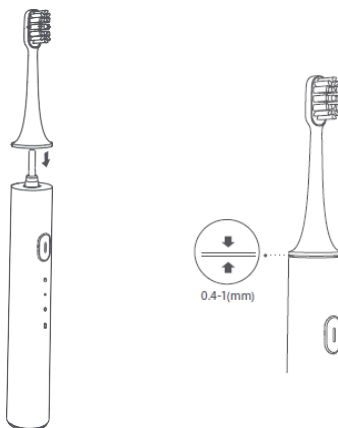

## d. Vyberte režim



On/Off/prepínanie režimov

- Zapnutie: Krátko stlačte tlačidlo pre zapnutie.



- Prepínanie režimov: Ak je zariadenie zapnuté, stlačte znovu pre prepnutie režimu.



- Pauza: stlačte tlačidlo na 1 sekundu pre pauzu. Ak 30 sekúnd nebudete pokračovať v čistení, tak sa zariadenie samo vypne.




- Vypnutie: Ak je zariadenie zapnuté, prepnite do oblúbeného režimu a potom znovu prepnite režim pre vypnutie kefy.



- V prípade zvláštnych podmienok, stlačte a držte tlačidlo na 12 sekúnd pre obnovenie továrenského nastavenia. (Aby nedošlo k chybe dát, tak synchronizujte dáta s mobilným telefónom pomocou Bluetooth)

## e. Čistite si zuby zdravo

- Pomaly pohybujte kefku pod uhlom 45° medzi kefkou a dasnami.
- Pri čistení zubov je možné ľubovoľne stlačiť On/Off tlačidlo pre prepnutie režimu.
- V priebehu čistenia kefka prestane vibrovať každých 30 sekúnd, aby vás upozornila na zmenu čistiacieho pozície.
- Ak kefka aktívne nezastavuje vibrácie, tak sa automaticky vypne pri dokončení čistiacieho režimu (čistiaci režim môže byť zvolený v aplikácii).

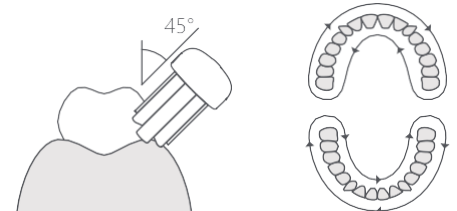


## f. Čistenie hlavy kefky

- Po čistení opláchnite hlavu kefky pod tečúcou vodou.
- Po dokončení čistenia zubov prikryte hlavu kefky ochranným krytom, aby sa hlava kefky udržala hygienicky čistá.



## FDA Testovanie jedla a liekov

- Akrylonitrilové kopolyméry a živcové časti boli testované v súlade s U.S.F.D.A C.F.R.21. Časť 180.22 a 181.32; Nylónové živice boli testované v súlade s U.S.F.D.A C.F.R.21. Časť 177.1500.

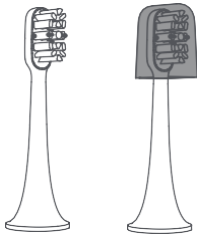


\* Je odporúčané vymeniť hlavu kefky každé 3 mesiace.

## g. Nabíjajte kefku pravidelne

- Po pripojení nabíjacej základne do siete môže indikátor napájania zubnej kefky zobrazit rôzne efekty:

100 %: Stále modrozelené svetlo  
100 % – 60 %: Bliká modrozeleno  
60 % – 20 %: Bliká oranžovo  
< 20 %: Bliká červeno

- Trvá dlhšie než 12 hodín, kým sa batéria úplne nabije (indikátor batérie bliká červeno).
- Ak je spojenie Bluetooth úspešné v priebehu nabíjania, indikátor napájania/Bluetooth blikne trikrát a pripojenie Bluetooth je zachované. Po odstránení pripojenia Bluetooth sa obnoví účinnosť indikácie nabíjania.

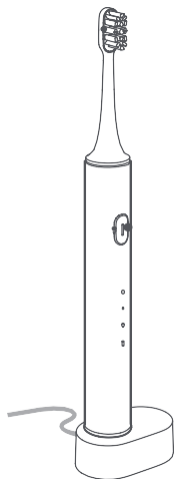

- Bluetooth pripojené: modrá
- 100 %: svieti modrozeleno
- 100 % – 60 %: bliká modrozeleno
- 60 % – 20 %: bliká oranžovo
- 20 % – 0 %: bliká červeno

## Stiahnutie aplikácie Mi Home

### a. Rýchle nastavenie

Kontrolujte svoje zariadenia a prepojte ich s ostatnými inteligentnými zariadeniami v Mi Home aplikácii.

- Stiahnutie a inštalácia Mi Home aplikácie.  
Naskenujte QR kód alebo aplikáciu stiahnite v App store.



### 2. Pridanie zariadenia

Otvorte aplikáciu Mi Home a stlačte „+“ vpravo hore a pokračujte podľa aplikácie pre pridanie vášho zariadenia.

### b. Pripojenie aplikácie Mi Home

- Povoľte funkciu Bluetooth na smartphone a držte kefku blízko vášho smartphona.
- Otvorte aplikáciu Mi Home, klepnutím na „+“ vpravo hore vstúpite na stránku pre výber zariadenia.
- Vyhľadajte a zvolte „Mi Electric toothbrush“ a dostanete sa na stránku spojení.
- Stlačte a podržte tlačidlo napájania na 3 sekundy, Bluetooth indikátor trikrát blikne a začne svietiť a potom zhasne, potom sa zariadenie zobrazí na domovskej stránke, ak je úspešne pripojené.

\* Zubná kefka nefunguje v priebehu pripojenia Bluetooth. Bluetooth nie je možné pripojiť, keď zubná kefka pracuje.

### c. Synchronizácia dát

Stiahnite si Mi Home App, registrujte Mi account, a prihláste sa k vášmu účtu. Zvoľte „Moje zariadenia“ a pridajte zariadenie do zoznamu zariadení.



Dajte kefku bližšie k telefónu.



Posuňte stránku dole pre synchronizáciu dát.



Synchronizácia dát je kompletná.

### d. Zobrazenie prehľadov a nastavení funkcií

- Prepnite do obľúbeného režimu.
- Zobrazia sa údaje o čistení a správy o analýze.
- Zobrazte zostávajúce dni do výmeny hlavy zubnej kefky.

## Ochrana životného prostredia

Dobíjacia lítiová batéria vo vnútri produktu môže obsahovať znečisťujúce látky. Pred vyradením výrobku alebo jeho uvedením do rekultivačného skladu určeného vládou nezabudnite batériu vybrať a odoslať ich do určeného rekultivátora. Ak sa batériu nepodarí vybrať, môžete ich poslať späť do servisného strediska Mi. Pracovníci servisných stredísk vyberú batérie a ekologicky ich zlikvidujú.

## Špecifikácia

### Rukoväť kefky

Meno: Mi Electric Toothbrush  
Model: DDYS01SKS  
Voltáž: 3.7 V ~ 0.55 A  
Napätie: 2 W  
Čas nabíjania: približne 12 hodín  
IP: IPX7  
Bluetooth 4.0  
Frekvencia: 2402-2480 MHz  
Maximálny výstupný výkon RF: 0 dBm  
Bezdrôtové nabíjanie  
Rozsah frekvencie: 483.85 KHz

### nabíjacia základňa

Režim nabíjania: indukčné nabíjanie  
Typ: bezpečne uzatvorený typ nabíjacej základne  
Hodnotenie IP: IPX7  
Vstup: 5 V ~ 0,5 A  
Vyrobené v Číne

### \* Rady:

- Tento prístroj môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak im bol poskytnutý dohľad alebo inštrukcie o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a boli informované o nebezpečenstve pri používaní.
- Majte deti v priebehu používania pod dohľadom, aby sa so zariadením nehrali.
- Pokyny pre prístroje triedy III uvádzajú, že musia byť dodávané iba firmou SELV.
- Zubné kefky môžu používať deti a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú možným rizikám.

## Odstraňovanie problémov

Problém	Príčina
Zariadenie nie je možné zapnúť	Zariadenie sa nabíja; Zariadenie je pripojené cez Bluetooth; Batéria je málo nabitá.
Kefku nie je možné nasadiť na nabíjajúcu základňu	Otvor na spodnej strane kefky je blokován; Zubná pasta alebo iné látky sa dostali na základňu; Kefka nie je originálny Mi Electric Toothbrush.
Spotreba energie je vysoká a zariadenie musí byť často nabíjané.	Prístroj je pripojený cez Bluetooth dlhú dobu; Zariadenie je veľmi často používané.
Vibrácie hlavy kefky sú slabé	Hlava na zubnej kefke nie je inštalovaná správne; Cudzí predmet sa nachádzajú medzi hlavou zubnej kefky a rukoväťou zubnej kefky.
Aplikáciu nie je možné pripojiť k zubnej kefke	Bluetooth je vypnuté; Zubná kefka nie je v dostatočnej vzdialenosti; Kefka je v stave vibrovania.

Prečítajte si starostlivo tento manuál a uschovajte ho pre budúce použitie.

Vyrobene pre: Xiaomi Communications Co., Ltd.  
Vyrobene: Soocas (Shenzhen) Technology Co., Ltd. (a Mi Ecosystem Company)  
Adresa: Room 2018, Block B, Floor 2, Ruifeng Business Center,  
No. 22 Guimiao Road, Nanshan District, Shenzhen, China

### Dodávateľ:

Beryko s.r.o.  
Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň  
www.berkyo.cz