




UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Mi Body Composition Scale

Vloženie batérií

Otvorte kryt batérií na zadnej strane váhy a vložte 4 kusy AAA batérií.

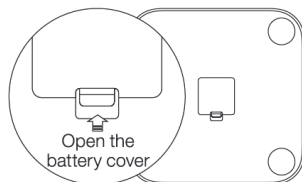

Prepojenie s aplikáciou


Nascanujte uvedený QR kód na stiahnutie ovládacej aplikácie, prípadne aplikáciu tiež nájdete v App Store či Google Play pod názvom "Mi Fit App".

Pomocou sprievodcu dokončíte prepojenie s telefónom.

Začíname s používaním


Položte váhu na tvrdý a rovný povrch, postavte sa na všetky 4 elektródy bosými nohami. Akonáhle sa hmotnosť stabilizuje, váha začne merať údaje o zložení vášho tela. Dokončenie procesu je indikované blikaním indikátora, následne môžete skontrolovať detailné hodnoty.

Pozn.: Uvedené hodnoty sú iba pre Vašu informáciu, nezamieňajte je s lekárskeym odporúčaním.

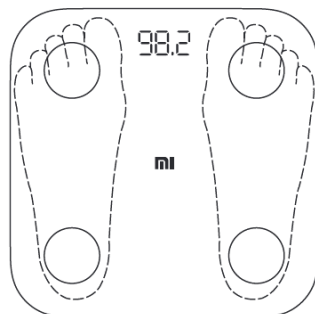


Chybové hlášky

Ak váha začne zobrazovať symbol "L", znamená to vybitú batériu. Vymeňte batérie čo najskôr to bude možné.

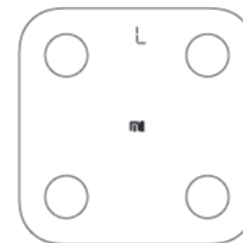

Ak váha začne zobrazovať symbol "OL", znamená to, že váha môže byť preťažená hmotnosťou mimo jej rozsah, teda cez 150kg.

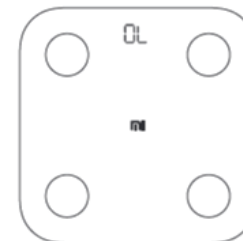

Bezpečnostná opatrenia

- ☒ Nepoužívajte váhu na mokré alebo vlhké podlahe.
- ☒ Nestúpajte na roh váhy, inak sa vystavujete riziku pádu.
- ☒ Na čistenie používajte vlhkú handričku alebo neutrálne detergent. Nepoužívajte organické rozpúšťadlá alebo iné chemikálie.
- ☒ Nepoužívajte zariadenie mimo teploty 0 ° C - 40 ° C
- ☒ Vybité batérie nenechávajte v prístroji, hrozí ich vytečeniu.
- ☒ Prístroj by nemali používať ľudia s kardiostimulátorom či inými zdravotnými implantátmi.

Likvidácia výrobku

Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v dokumentácii značí, že produkt a elektronické príslušenstvo (napr. Nabíjačka, slúchadlá, kábel USB) by nemali byť likvidované s bežným domácim odpadom.

Výrobce: Anhui Huami Information Technology Co., Ltd.
Rm1201, Building A4, Naational Animation Industry Base, 800,
Wangjiang West Road, Gaoxin District, Hefei, Anhui, China

www.mi.com

Dodávateľ:

Beryko s.r.o.
Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň
www.berkyo.cz

